

TRIACTIVE +



MEDICINA ESTÉTICA

TRIACTIVE +

Tratamiento de la celulitis
Adiposidad localizada
Flacidez
Anti Edad
Retención de líquidos
Piernas cansadas

Modelación corporal DEKA:
la armonía del cuerpo hecha ciencia

Tecnologías inteligentes DEKA:
expertos desde el inicio



The Code of Excellence

TRIACTIVE+

EL EQUILIBRIO ES LA BASE DEL BIENESTAR

Celulitis, adiposidad localizada y flacidez son problemas estéticos frecuentes y ampliamente difundidos. Cada día, millones de personas buscan métodos menos invasivos para modelar la silueta.

TriActive+ , fruto de una profunda investigación científica y de diseño, combina la acción de seis cabezales diferentes en una única plataforma. Gracias a la ayuda del método Dermodynamic, el tratamiento es parte integrante de un cuidado completo del cuerpo.

TriActive+ puede devolver al cuerpo del paciente su perfil original: ahora, se puede recuperar armonía y belleza sin traumas ni métodos invasivos.

“TriActive+ es una plataforma de trabajo diseñada para facilitar nuestra tarea. Tecnología sencilla e inteligente que garantiza el bienestar del paciente y es sumamente versátil en el centro médico.

Triactive+ es eficaz en los tratamientos de modelado no invasivo del cuerpo: actúa profundamente en las imperfecciones derivadas de disfunciones de la microcirculación y es fundamental para mejorar el trefismo de la piel.

Utilizando una única estación de trabajo, médicos, fisioterapeutas y especialistas pueden hoy armonizar el perfil del cuerpo y erradicar los signos del tiempo: un instrumento mucho más sencillo, potente y eficaz que los disponibles hasta ahora.”

Prof. Daniel Cassuto

*Unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva
Universidad de Catania, Italia*

MEDICINA ESTÉTICA TRIACTIVE+

TRIACTIVE+ : ACCIÓN REGENERADORA PARA LA BELLEZA TOTAL

Las causas de las imperfecciones son múltiples: únicamente combinando la acción de dos o tres cabezales diferentes se pueden enfocar todos los componentes de una disfunción específica. En efecto, para eliminar una imperfección de manera permanente, es necesario que todos los sistemas del cuerpo humano vuelvan a trabajar con el orden natural que les es propio.


Con su acción combinada y complementaria, la plataforma TriActive+ utiliza láser, ultrasonido y radiofrecuencia para combatir imperfecciones tales como celulitis, adiposidad localizada y flacidez.

El tensado de la piel y el rejuvenecimiento completan la excelencia de las posibilidades de TriActive+: tecnología diseñada para devolver al cuerpo su armonía y eliminar los signos visibles de la edad.



5	Principios de acción: láser, ultrasonidos, radiofrecuencia, masaje, enfriamiento.
6	Cabezales diferentes para tratar la cara y el cuerpo.
7	Láseres de diodo CW.
2	Emisiones diferentes de radiofrecuencia.
2	Emisiones de ultrasonidos a distintas frecuencias.
14	Protocolos de tratamiento guardados en el sistema con la opción de personalizar y actualizar la base de datos.
Más de 1000	Sistemas Triactive vendidos en todo el mundo (datos de enero de 2010).
2001	DEKA es la primera empresa en presentar al mundo el método Dermodynamic para el tratamiento de la celulitis con la acción combinada y sinérgica de láser-masaje-frío.
Cientos de	Publicaciones y artículos en periódicos de todo el mundo.

LA TRIPLE ACCIÓN DEL CABEZAL LÁSER

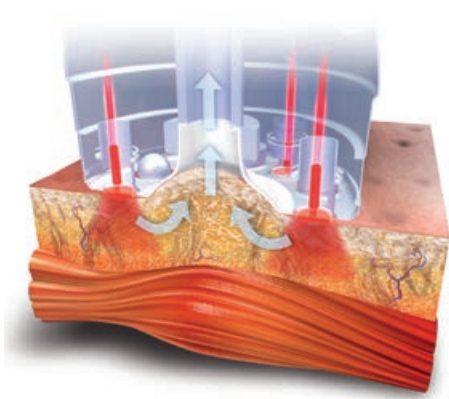

El cabezal láser corporal combina en un único sistema 3 acciones diferentes, que interactúan en sinergia para restaurar las condiciones homeostáticas normales de la piel.

En el año 2001, DEKA diseñó un innovador cabezal láser con características únicas. Equipado con tres tecnologías diferentes, el cabezal láser TriActive+ devuelve rápidamente a la piel sus condiciones homeostáticas normales con grandes beneficios para el paciente. La acción combinada y sinérgica de estos tres principios activos estimula la eliminación del exceso de líquidos y de las sustancias tóxicas contenidas en los mismos. Esto es muy beneficioso durante las fases iniciales de la celulitis, caracterizadas por edema y retención de líquidos. La acción del láser es sumamente importante en esta etapa, porque ayuda a abrir los ganglios linfáticos principales, favoreciendo la eliminación de sustancias indeseadas y perjudiciales:

Acción nº 1: estimulación profunda con láser

Triactive+ reactiva y aumenta la microcirculación arterial, venosa y linfática, favoreciendo la neangiogénesis de los vasos sanguíneos intradérmicos. La energía lumínica del láser tiene efectos benéficos también sobre la actividad de los fibroblastos.

Acción nº 2: enfriamiento localizado

El sistema de enfriamiento localizado aumenta el efecto reductor de volumen, favoreciendo la perfecta reabsorción del edema al estimular el movimiento vascular.


Acción nº 3: masaje dérmico

El masaje por aspiración rítmica favorece el drenaje linfático y los procesos de estimulación de los tejidos, mejorando la restauración de la tensión y elasticidad normales del colágeno de la piel.

Con los cabezales de radiofrecuencia y ultrasonidos, la acción de Triactive+ es todavía más potente, eficaz y agresiva.



Todas las piezas de mano de TriActive+ están diseñadas de forma ergonómica, para permitir que operadores, tanto diestros como zurdos, puedan manejarlas suavemente, y tratar cualquier zona del cuerpo fácilmente y sin esfuerzo.

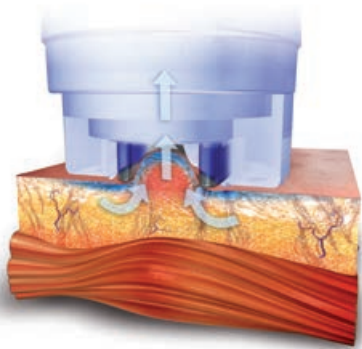


El cabezal de radiofrecuencia para el cuerpo utiliza tecnología bipolar con aspiración, calentando de manera selectiva sólo la zona de la piel plegada, con una acción profunda y localizada sobre la dermis e hipodermis, con limitada dispersión de corriente a las zonas adyacentes.

LA REVOLUCIÓN DE LA RADIOFRECUENCIA: POTENTE Y EFICAZ CONTRA CUALQUIER IMPERFECCIÓN

Los cabezales de radiofrecuencia de TriActive+ colaboran con la luz del láser en la eliminación de la celulitis y mejoran el turgor de la piel. Gracias a la gimnasia de los tejidos, que el operador activa al utilizar el cabezal, la radiofrecuencia estimula la contracción de las fibras de colágeno, activando la normalización del tono de la piel, la microcirculación y el drenaje del exceso de líquidos

Cabezal facial: la tecnología multipolar de este cabezal reduce los efectos adversos y hace más tolerables los tratamientos.

Cabezal corporal: la tecnología bipolar activa selectivamente el calentamiento del pliegue de la piel con una acción localizada y en profundidad sobre la dermis y la hipodermis. El enfriamiento continuo posibilita la preservación de las capas más superficiales.

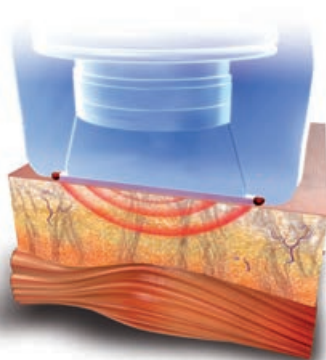

La tecnología de ultrasonidos ha sido renovada totalmente gracias al desarrollo de dos cabezales para el cuerpo con diferentes frecuencias, que aseguran tratamientos a la medida de las exigencias individuales.

LOS ULTRASONIDOS ELIMINAN LA CELULITIS Y REMODELAN LA TEXTURA DE LOS TEJIDOS

Las ondas producidas por los cabezales inducen vibraciones en los adipocitos: el profundo masaje mecánico actúa eficazmente reduciendo las fibrosis, especialmente en paniculopatías en estado avanzado. La nueva tecnología de ultrasonidos TriActive+ estimula la circulación vascular y el drenaje de líquidos gracias a una especial gimnasia de los tejidos.

El cabezal de acción profunda en el cuerpo (baja frecuencia): el cabezal de baja frecuencia (36-39 kHz) ha sido diseñado para tratar amplias zonas del cuerpo.

El cabezal de acción superficial en el cuerpo (alta frecuencia): con el cabezal de alta frecuencia pueden efectuarse tratamientos más flexibles en zonas más superficiales y delicadas.

Triactive+ tiene una acción aún más profunda en los tratamientos para devolver firmeza a la piel, y resulta excelente también en nuevos campos de aplicación tales como la flacidez de la piel.

DERMODYNAMIC: UN MÉTODO SENCILLO PARA PROBLEMAS COMPLEJOS



Las causas de las imperfecciones de la piel suelen estar interrelacionadas, y para solucionar el problema es necesario tratar todo el cuerpo. Los tratamientos estéticos son sólo una parte de un enfoque global.

Correctamente aplicado, el método Dermodynamic DEKA permite lograr notables resultados estéticos y ofrecer a los pacientes un gran bienestar físico y psíquico.

Después de recoger informaciones sobre los síntomas del paciente, sus motivaciones y expectativas, el médico identifica los protocolos que ha de usar para hacer frente a todo tipo de modelación corporal y problemas de rejuvenecimiento. Una vez definido el objetivo, el profesional selecciona la secuencia correcta de uso para los cabezales, según las especificaciones técnicas propias de cada fuente.

Es posible definir un enfoque general de tratamiento evaluando las características propias de cada fuente: :



- **Tecnología de ultrasonidos**

Moviliza los tejidos, reduce hiperplasia e hipertrofia de las fibras reticulares.

- **Tecnología láser**

Drena los edemas y reduce la estasis linfática y venosa y la retención de líquidos.

- **Radiofrecuencia**

La radiofrecuencia tonifica los tejidos flácidos y estimula la actividad de los fibroblastos.

Ergonomía y diseño van de la mano en el sistema TriActive+, creando una síntesis perfecta de tecnología y practicidad.

La acción combinada de láser, enfriamiento, masaje, ultrasonidos y radiofrecuencia presentes en TriActive+ remodela los tejidos y mejora el tono y la elasticidad de la piel.

Base de datos: una herramienta inestimable desde el problema hasta la solución

Triactive+ está equipado con una base de datos que contiene protocolos completos de tratamiento aprobados por investigadores y médicos; esta base ha sido concebida para guiar a los operadores en la programación de los parámetros correctos y en la selección de la tecnología más eficaz.



Software fácil de usar, con controles sencillos, directos e intuitivos



El software TriActive+ dispone de una pantalla táctil fácilmente comprensible; guiado por el método **Dermodynamic**, el software facilita la organización de tratamientos completos, solucionando hasta los problemas más complejos.

ANTES Y DESPUÉS: TRATAMIENTOS DE MODELACIÓN CORPORAL



Cortesía de los doctores: P. Gilardino y A. Pelosi, fisioterapeutas Milán, Italia.

Cortesía de los doctores: P. Gilardino y A. Pelosi, fisioterapeutas Milán, Italia.

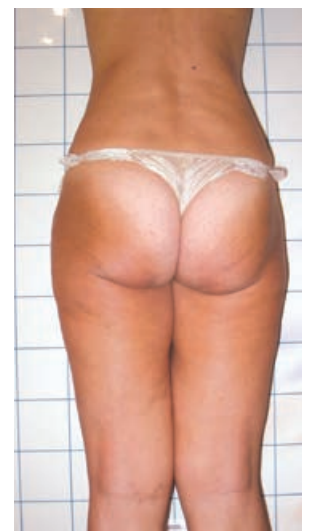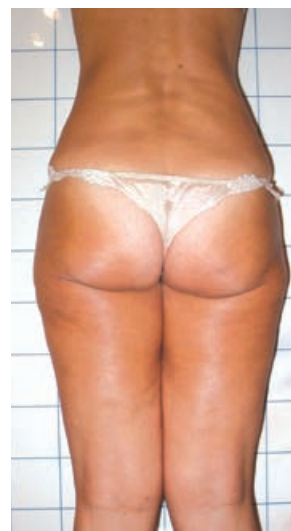

Cortesía de los doctores: P. Gilardino y A. Pelosi, fisioterapeutas Milán, Italia.

Cortesía de los doctores: P. Gilardino y A. Pelosi, fisioterapeutas Milán, Italia.

DATOS TÉCNICOS

Cabezal láser para el rostro

Tipo de láser	Diodo - CW
Longitud de onda	808 nm
Potencia	1 W
Masaje programable:	
Velocidad de repetición	Desde 0,1 a 5 Hz
Ciclo de trabajo	Desde el 5 hasta el 80%
Tipo	Monofásico / Bifásico / OFF

Cabezal láser para el cuerpo

Tipo de láser	Diodo - CW
Longitud de onda	808 nm
Potencia	6 x 1 W
Sistema de enfriamiento localizado	Regulable desde 18 a 28° C
Masaje programable:	
Velocidad de repetición	Desde 0,1 hasta 5 Hz
Ciclo de trabajo	Desde el 5 hasta el 80%
Tipo	Monofásico / Bifásico / OFF

Cabezal de ultrasonidos Alta Frecuencia

Tipo US	Alta frecuencia (HF)
Frecuencia US	3 MHz
Fluencia	< 3 W/cm ²
Diámetro transductor	25 mm
Modalidad	CW-PW
Velocidad de repetición del pulso	Desde 2 hasta 10 Hz
Duración del pulso	Desde 10 ms hasta 200 ms

Cabezal de ultrasonidos Baja Frecuencia

Tipo US	Baja frecuencia (LF)
Frecuencia US	36-39 kHz (Modalidad barrido)
Fluencia US	< 3 W/cm ²
Diámetro transductor	70 mm
Modalidad	CW-PW
Velocidad de repetición del pulso	Desde 2 hasta 10 Hz
Duración del pulso	Desde 10 ms hasta 200 ms
Tiempo de barrido (modalidad barrido)	Desde 1 s hasta 99 s

Cabezal de radiofrecuencia para el rostro

Tipo RF	Multipolar
Frecuencia	1 MHz
Potencia	20 W (máx.)

Cabezal de radiofrecuencia para el cuerpo

Tipo RF	Bipolar
Frecuencia	500 kHz
Potencia	50 W (máx.)
Sistema de enfriamiento localizado	Regulable desde 18 a 28° C
Masaje programable:	
Velocidad de repetición	Desde 0,1 hasta 5 Hz
Ciclo de trabajo	Desde el 5 hasta el 80%
Tipo	Monofásico / Bifásico / OFF

Especificaciones generales de sistema

Control inicio tratamiento	Pedal o pulsador en el cabezal
Suministro eléctrico	230 Vac / 2,6 A (máx.) / 50-60 Hz
Tamaño y peso	120 (H) x 48 (W) x 60 (D) / 60 kg



TRATAMIENTO DE LA CELULITIS - ADIPOSIDAD LOCALIZADA - FLACIDEZ
ANTI EDAD - RETENCIÓN DE LÍQUIDOS PIERNAS CANSADAS

TRIACTIVE+

CE
0459



Síganos en




The Code of Excellence

Tú centro



www.dekalaser.com

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA, la clave de la excelencia
DEKA, empresa del grupo italiano Ei.En., es líder mundial en diseño y fabricación de láseres y fuentes de luz para la medicina. Comercializa sus productos en más de 80 países, tanto a través de una extensa red de distribuidores como con oficinas propias en Italia, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos. DEKA destaca por la excelencia de sus productos, fruto de más de treinta años de experiencia en el campo de la investigación y desarrollo. Calidad, innovación y excelencia tecnológica colocan a DEKA y sus productos en una posición mundial única y destacada en el sector. DEKA fabrica instrumentos láser conformes con las especificaciones de la Directiva 93/42/CE; su sistema de garantía de calidad, certificado por  responde a los estándares ISO 9001 e ISO 13485.